



Timlogo

Ghid de utilizare

pentru **Specialiști**




Specialiști

Cea mai mare
platformă de logopedie
din România.




1. Înregistrare

1.1. Accesează pagina **www.timlogo.ro**, apoi apasă pe butonul „**Contul meu**”, pe care îl găsești în partea de centru sus a paginii.

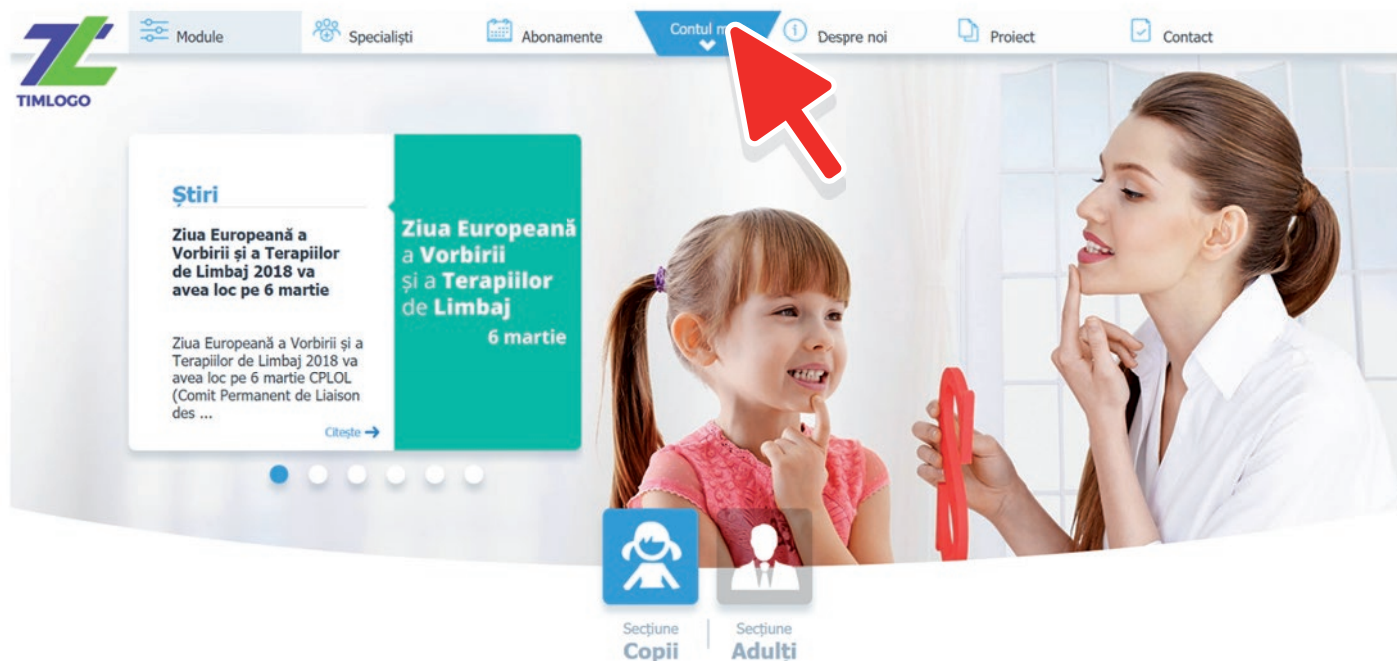

1.2. Se va deschide o casetă cu mai multe informații. Apasă pe butonul „**Vreau cont nou...**”.

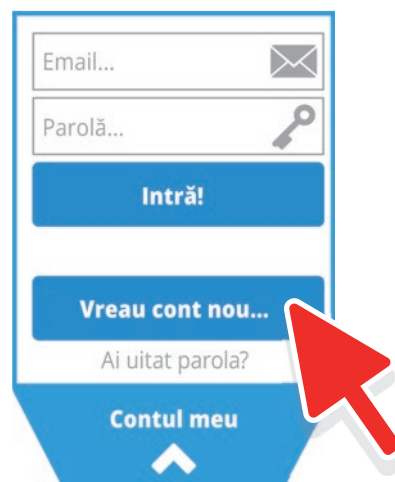


1.3. Se va deschide în același loc o casetă cu câmpurile pe care te rugăm să le completezi. După ce ai terminat de completat, apasă pe butonul „**Creează!**”.



2. Autentificare

2.1. Accesează pagina **www.timlogo.ro**, apoi apasă pe butonul „**Contul meu**”.

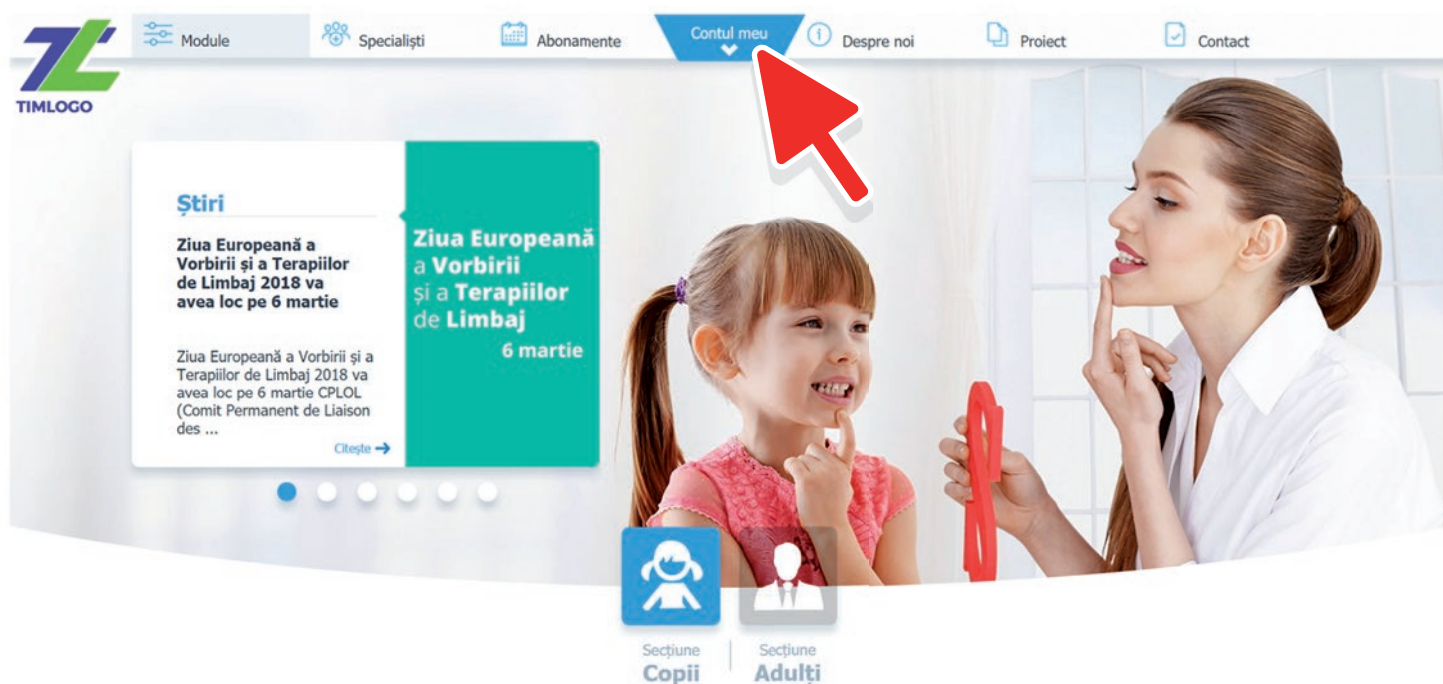

2.2. Se va deschide o casetă cu mai multe informații. Te rugăm să introduci adresa de e-mail și parola cu care te-ai înregistrat. Apasă apoi pe butonul „**Intră!**”.

2.3. Dacă ai uitat parola, apasă pe butonul „**Ai uitat parola?**” și vei fi rugat să introduci adresa de e-mail cu care te-ai înregistrat.

Dacă nu îți aduci aminte adresa de e-mail cu care te-ai înregistrat, te rugăm să ne scrii la „**contact@timlogo.ro**”.

3. Abonamente

3.1. Pe site-ul „www.timlogo.ro” apasă din meniul principal pe butonul „**Abonamente**”.



3.2. Alege tipul de utilizator „**Specialiști**” și un pachet din cele patru disponibile (**Bronze, Silver, Gold sau Platinum**).



2

1	3	12	48
LUNĂ	LUNĂ	LUNĂ	LUNI
Descriere pachet:	Descriere pachet:	Descriere pachet:	Descriere pachet:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestionarea unui număr nelimitat de pacienți ✓ Acces complet la toate modulele logopedice ✓ Creare de recomandări personalizate pentru fiecare pacient ✓ Evidență de parcurgere pentru fiecare pacient 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestionarea unui număr nelimitat de pacienți ✓ Acces complet la toate modulele logopedice ✓ Creare de recomandări personalizate pentru fiecare pacient ✓ Evidență de parcurgere pentru fiecare pacient 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestionarea unui număr nelimitat de pacienți ✓ Acces complet la toate modulele logopedice ✓ Creare de recomandări personalizate pentru fiecare pacient ✓ Evidență de parcurgere pentru fiecare pacient 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestionarea unui număr nelimitat de pacienți ✓ Acces complet la toate modulele logopedice ✓ Creare de recomandări personalizate pentru fiecare pacient ✓ Evidență de parcurgere pentru fiecare pacient <p>*Reseller Posibilitatea de a alocă luni de acces pacienților dumneavoastră</p>
Preț: 99 lei + TVA	Preț: 254 lei + TVA	Preț: 986 lei + TVA	Preț: 56 LEI x Nr. luni + TVA
Cumpără	Cumpără	Cumpără	Cumpără


4. Module

4.1. Pe site-ul **www.timlogo.ro**, în partea de sus, în meniul principal, apasă pe butonul „**Module**”. Pentru a vedea toate modulele este necesar să derulezi în jos pagina încărcată


The screenshot shows the TIMLOGO website interface. The 'Module' link in the top navigation bar is highlighted with a red circle and a red arrow. The main content area features a large banner with a woman and a child, and a sidebar with news articles about 'Ziua Europeană a Vorbirii și a Terapiilor de Limbaj 2018'. At the bottom, there are icons for 'Secțiune Copii' and 'Secțiune Adulți'.

4.2. Am structurat modulele astfel încât să le descoperi ușor:


1. Alege ce tip de module cauți: copii sau adulți
2. Caută după o anumită literă
3. Poți filtra după tipul exercițiului: oclusive, africcate, fricative, nazale, etc.

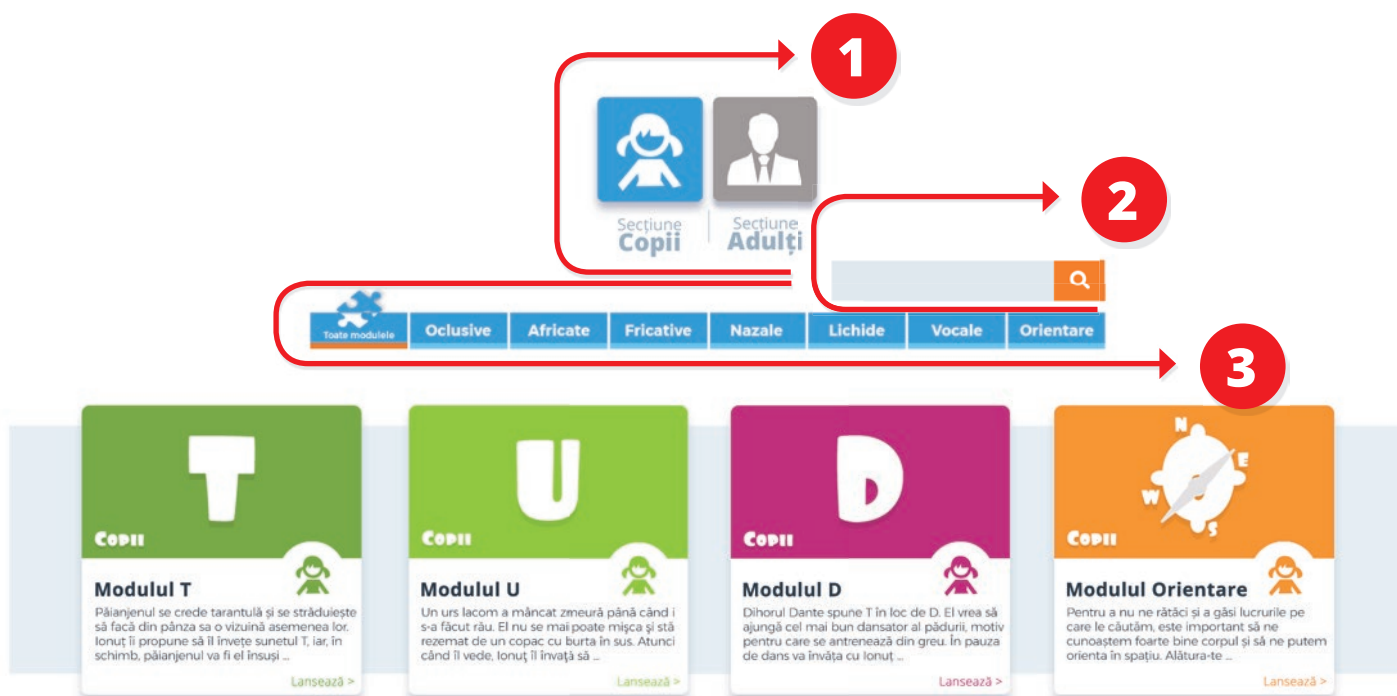

4.3. Odată ce ai ales modulul care te interesează, se va încărca o pagină de prezentare a acestuia. Dacă este ceea ce cauți sau pur și simplu vrei să încerci modulul ales, apasă pe butonul „Lansează!”.

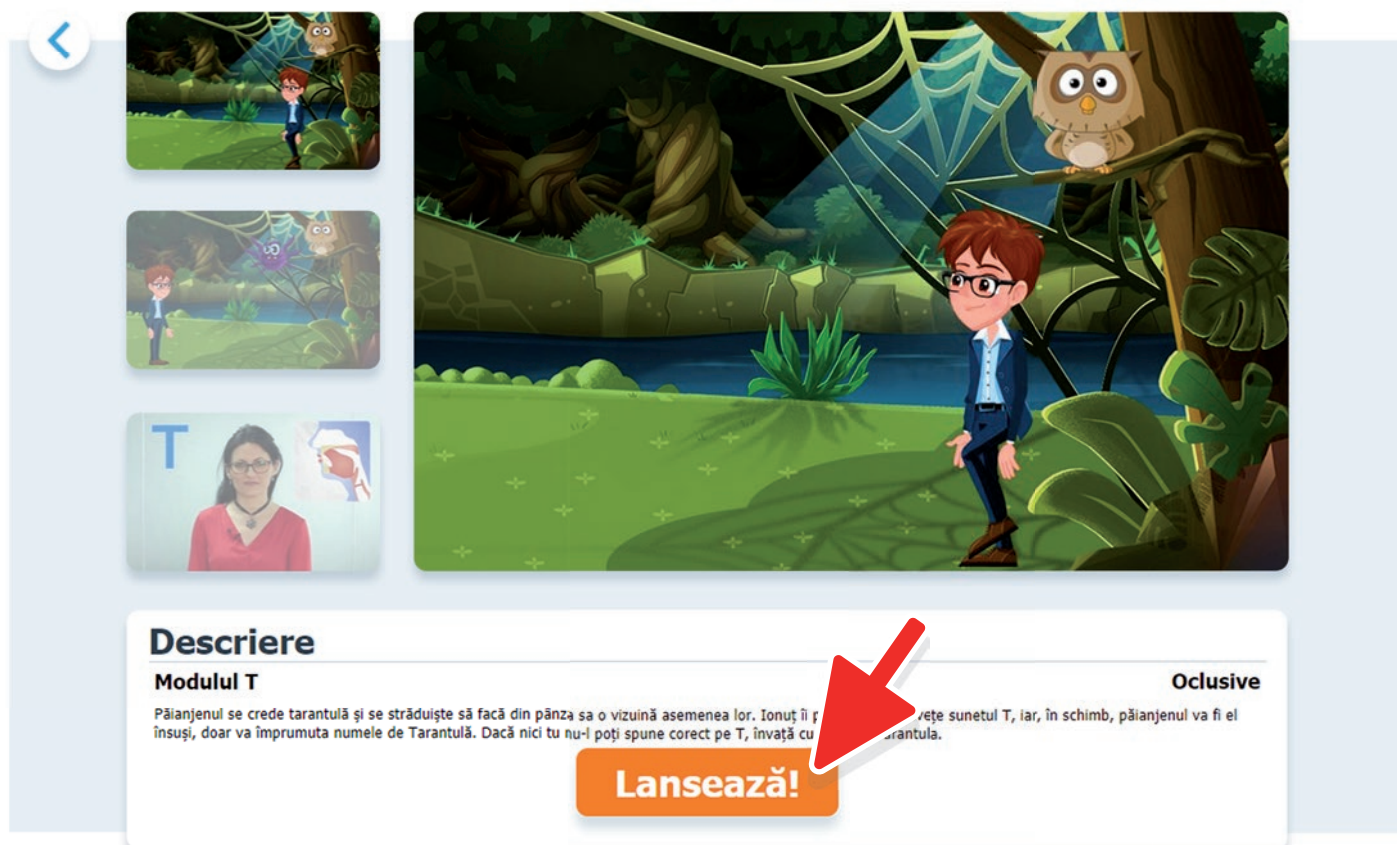


4.4. Este important să reții că trebuie să apeși pe ecran pentru a activa aplicația.

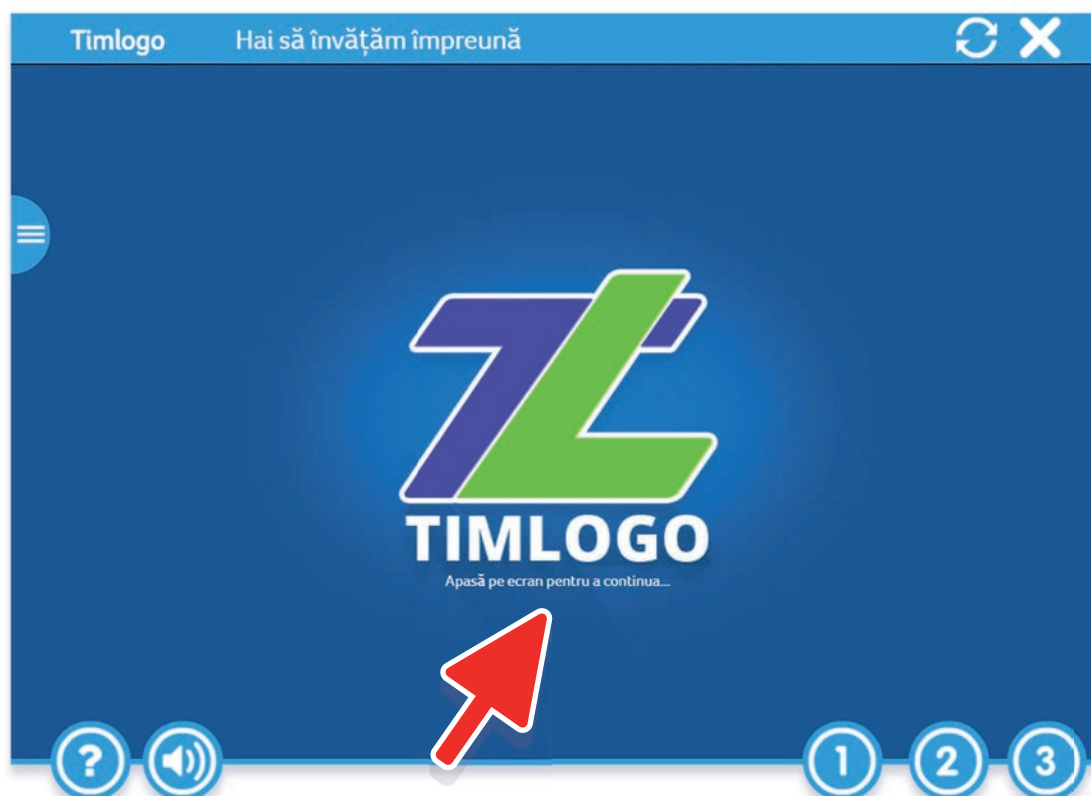

4.5. Acum că ai ajuns la exercițiul pe care îl căutai, iată câteva informații care îți vor fi de folos:

1. În partea din stânga centru vei găsi lecțiile din cadrul unității. Activează acest meniu, apăsând pe iconița cu trei linii albe orizontale plasată în partea stângă.
2. În partea stânga jos sunt butoanele „Ajutor” și „Dezactivează sunet”.
3. În partea dreapta jos sunt trei butoane numerotate de la 1 până la 3. Ele reprezintă unitățile exercițiului. Fiecare unitate are lecția sa.
4. În partea din dreapta, sus, sunt două butoane. Iconița cu „săgețile într-un cerc” reia exercițiul de la început, iar iconița cu „X” închide aplicația și te întoarce la lista modulelor disponibile.

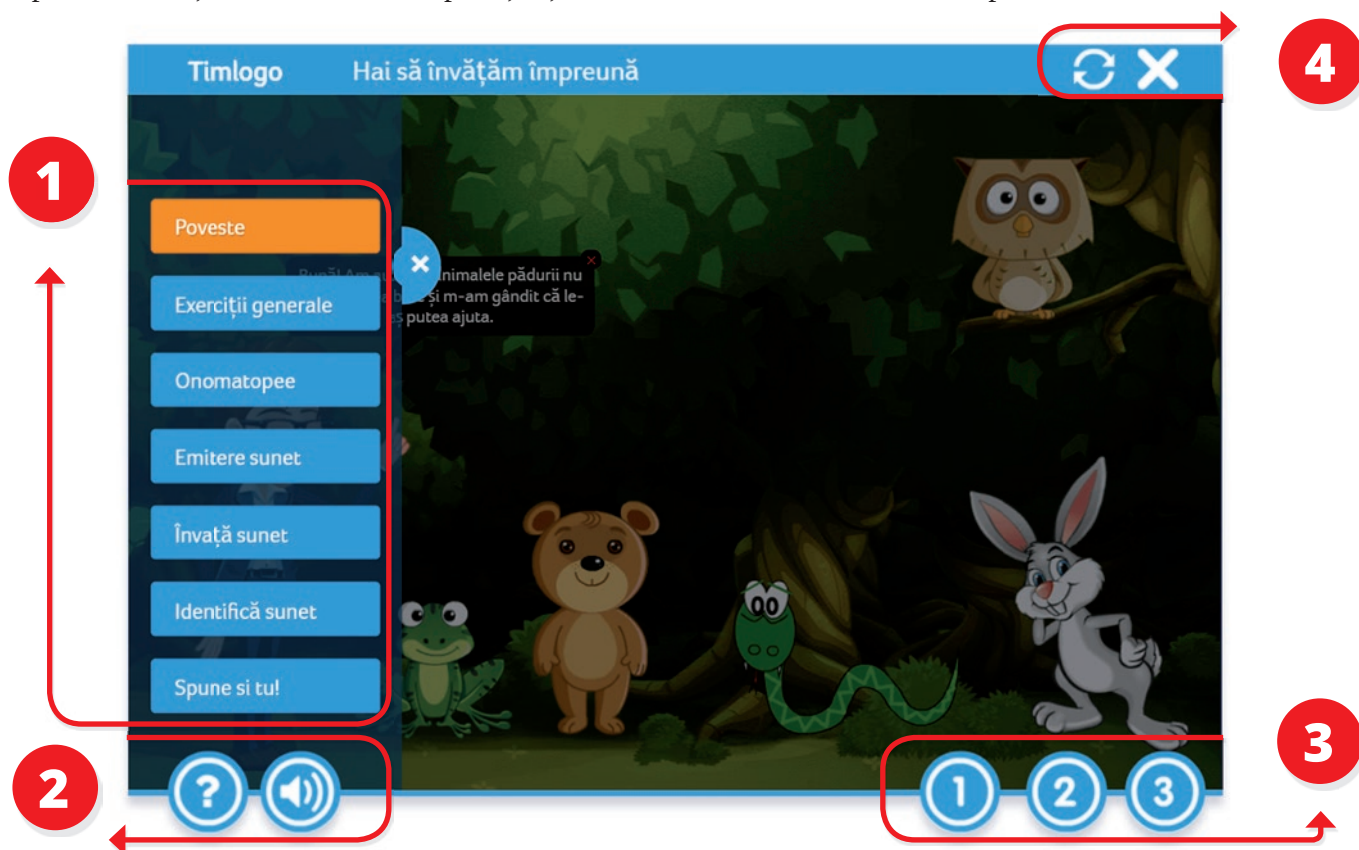

5. Specialist

5.1. Adaugă cursant. Pentru a adăuga un cursant te rugăm să mergi în „**Contul meu**”. Derulează mai jos pagina până când vei vedea o listă de module. În partea din dreapta, pe un fundal portocaliu, scrie „**Adaugă după e-mail**”. Scrie în interiorul acestui câmp adresa de e-mail a cursantului pe care dorești să îl adaugi și apoi apasă pe iconița „**Plus**”. O invitație va fi trimisă la adresa furnizată.

Caută cursant...	Q	Notificări
Cursant- Cristina Olimpia	1	Notificare Toate 2018
Cursant- Maria Iosif	1	Notificare Instituție
Cursant- Diana Viorel	3	Notificare Site 8
Cursant- Lucia Sorin	1	Notificare Cursant
Cursant- Atanase Silviu	4	Notificare Cursant-Atanase silviu 26.02.2018
Cursant- Ciprian Marin	2	Notificare Cursant-Ciprian Marin 07.02.2018
Cursant- Raluca Denis	1	Notificare Cursant-Raluca Denis 15.03.2018

Cursanți înscriși	Tematică				Adaugă cursanți noi
	Nr.	Nume Modul	Status	Recomandări Specialist	
Matei Costică costica.matei13@gmail.com Brașov	1	Modulul Orientare	Finalizat		Adaugă după email +
Radu Carol	2	Modul S	Finalizat		ion.popa4432@gmail.com
					costica.matei13@gmail.com

5.2. Recomandări. Pe pagina modulului selectat vei putea oferi recomandări personalizate cursantului.

Descriere

Modulul U

Un urs lacom a mâncat zmeură până când i s-a făcut rău. El nu se mai poate mișca și stă rezemat de un copac cu burta în sus. Atunci când îl vede, Ionuț îl învață să spună corect litera U ca să treacă timpul mai repede și să nu-l mai doară burta. Alătură-te și tu!

Lansează!

Obiective

- Identificarea sunetului individual, în silabă, în cuvânt.
- Împostarea sunetului
- Recunoașterea semnului grafic corespunzător sunetului
- Pronunțarea sunetului în silabă și cuvânt
- Consolidarea sunetului

Complet

Recomandări Generale

Pronunțarea corectă a vocalei U, presupune buna consolidare a fonemului U. De aici, prin exerciții specifice, vei auzi sunetul U.

Recomandări Personalizate

Selectează un cursant pentru a-i oferi recomandări personalizate.

Pentru a putea primi recomandări personalizate, va rugăm să contactați specialiștii nostri logopezi.

Contactează Logoped

Modulul U

Un urs lacom a mâncat zmeură până când i s-a făcut rău. El nu se mai poate mișca și stă rezemat de un copac cu burta în sus. Atunci când îl vede, Ionuț îl învață să spună corect litera U ca ...

Lansează >

Modulul O

O oaie cu blana foarte mare s-a blocat în niște mărțoni și nu poate ieși de acolo. Cu cât se zbate mai mult, cu atât îi este mai greu să iasă de acolo. Ionuț o găsește și pentru a o face să...

Lansează >

Modulul I

Iepurele Picio-țute încearcă să-și dea seama de ce i-au crescut doar 10 morcovi, deoarece el a semănat 15. De supărare, nici nu poate să pronunțe corect litera I. Ionuț încearcă să-l ajute,...

Lansează >

Modulul E

Unul dintre elanii lui Moș Crăciun i-a ținut locul unui reni la sanie și s-a răstăcut prin pădure. Când ceilalți reni l-au găsit, elanu nu a vrut să se întoarcă la Polul Nord pentru că îi plă...

Lansează >

5.3. Parcurusul cursantului. Vei putea urmări parcurusul cursantului din „Contul meu”.

Cursanți înscriși	♥ Tematică				Adaugă cursanți noi
	Nr.	Nume Modul	Status	Recomandări Specialist	
Matei Costică costica.matei13@gmail.com Brașov	1	Modulul Orientare	Finalizat		Adaugă după email
Radu Carol radu_carol@yahoo.com Timișoara	2	Modul S	Finalizat		ion.popa4432@gmail.com
Cristina Olimpia cristinaolimpia@yahoo.com Arad	3	Modul Ș	Finalizat		costica.matei13@gmail.com
Cosmin Simon cosmin_simon_1983@gmail.com Oradea	4	Modul J	Finalizat		radu_carol@yahoo.com
Liviana Constantin liviana.constantin@gmail.com Constanța	5	Modulul CE	Început		cristinaolimpia@yahoo.com
Maria Iosif iosifdeliamaria@yahoo.com Brașov	6	Modulul CI	Finalizat		cosmin_simon_1983@gmail.com
Diana Viorel dianaviorel@gmail.com București	7	Modulul GE	Finalizat		liviana.constantin@gmail.com
Lucia Sorin luciamariasorin@gmail.com București	8	Modulul GI	Finalizat		iosifdeliamaria@yahoo.com
Dana Tatiana dana.tatiana.91@yahoo.com București	9	Modulul L	Finalizat		dianaviorel@gmail.com
Atanase Silviu atanase_silviu23@yahoo.com București	10	Modulul R	Finalizat		luciamariasorin@gmail.com
Ciprian Marin cipriancorneliu@marin@yahoo.com București	11	Modulul C	Finalizat		luciamariasorin@gmail.com
Raluca Denis denis_raluca@yahoo.com Cluj-Napoca	12	Modulul G	Finalizat		dana.tatiana.91@yahoo.com
	13	Modulul H	Finalizat		florin.gontariu@ascendia.ro
	14	Modulul CHE	Finalizat		atanase_silviu23@yahoo.com
	15	Modulul CHI	Finalizat		cipriancorneliu@yahoo.com
	16	Modulul GHE	Finalizat		denis_raluca@yahoo.com
	17	Modulul GHI	Finalizat		dianaviorel@gmail.com
					alina.filip@gmail.com
					virgilbogdana@gmail.com
					gabi.marius@yahoo.com
					theodor_minodora@yahoo.com
					angelica_dan@yahoo.com
					flaviu_serafim_123@yahoo.com
					laurelfelix@yahoo.com
					vasileiosif63@yahoo.com
					verahoria@yahoo.com
					mihai_eddy@yahoo.com
					marcelamarin@gmail.com
					petru.teodor@gmail.com
					stelian.tatiana@yahoo.com
					laura_horatiu_91@yahoo.com



Contact



E-mail

contact@timlogo.ro



Telefon

+40371089200



Timlogo

www.timlogo.ro



ASCENDIA S.A.

Strada Avrig, nr. 12, Clădirea
Lotus Offices, etajul 4,
Sector 2, București, România

Timlogo

Cea mai mare **platformă
logopedică** din România
cuprinde:

476 de aplicații

239 de jocuri interactive

169 de activități animate

67 de video-uri

organizate în **34** de module
pentru toate sunetele din limba română



ASCENDIA